

Amplificateur téléphonique  
*Inline-telefoonversterker*  
**PL-51 / TA-2**




**Désormais, vous réglez le volume de votre téléphone à votre convenance.**

Connectez le PL-51 ou le TA-2 à votre téléphone fixe et profitez immédiatement de ses bienfaits.

***Nu »spreekt« uw telefoon met het volume dat u wenst.***

PL-51 of TA-2 op uw stationaire telefoon aansluiten en onmiddellijk ontspannen telefoneren

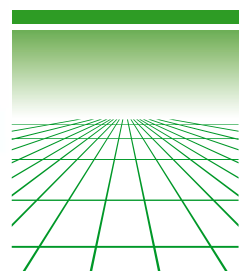



Une simple pression sur une touche (augmentation de l'amplification) et votre amplificateur téléphonique PL-51 vous restitue un son deux fois plus fort.  
Als de toets (extra versterking) ingedrukt is, verdubbelt de inline-telefoonversterker PL-51 het ingestelde volum

**C'est à vous de choisir :** l'amplificateur de téléphone **PL-51** à piles, facile à utiliser, trouve facilement sa place dans votre valise. Mais peut-être préférez-vous le **TA-2** pour un usage fixe ? Votre audioprothésiste sera heureux de vous donner de plus amples informations.

**De keuze is aan u:** de gebruiksvriendelijke telefoonversterker **PL-51** werkt op batterijen en past gemakkelijk in uw tas. Of misschien geeft u de voorkeur aan de **TA-2** voor stationair gebruik? Uw specialist in hoortoestellen vertelt u er graag meer over.

**Accessoires spéciaux**  
**Speciale accessoires:**



**Pas besoin d'un nouveau téléphone pour mieux comprendre votre interlocuteur.**

Connectez simplement l'amplificateur téléphonique **PL51** ou **TA2** entre le combiné et le téléphone pour que celui-ci compense aisément les pertes auditives légères et moyennes. Vous pouvez enfin entendre votre interlocuteur de manière claire et distincte.

**Les amplificateurs téléphoniques PL-51 et TA-2 :**

- Peuvent être connectés à tous les téléphones fixes modernes disposant d'une fiche standard entre le poste et le combiné
- Amplification réglable sans à-coups directement au niveau du combiné
- Possibilité de régler les graves et les aigus

- Alimentation par piles (le TA-2 dispose également d'un bloc d'alimentation)
- Prise pour connexion de boucle magnétique, cordon binaural/monaural, casque d'écoute
- Transmission directe à l'appareil auditif par sabot-audio
- Peuvent être associés à d'autres systèmes, par exemple des appareils à transmission infra-rouge, radio ou en réseau.

**U heeft geen nieuwe telefoon nodig om uw gesprekspartners beter te verstaan.**

Gewoon de telefoonversterker **PL51** of **TA2** aansluiten tussen hoorn en telefoontoestel, en uw normale telefoon wordt een toestel dat licht tot middelzwaar gehoorverlies zonder moeite

compenseert. U verstaat uw gesprekspartner opnieuw luid en duidelijk.

**De inline-telefoonversterkers PL-51 en TA-2:**

- Aansluitbaar op alle moderne stationaire telefoontoestellen met standaard stekkerverbinding tussen telefoon en hoorn
- Traploos instelbare volumeversterker direct aan de hoorn
- Hoge-/lage-tonenregeling
- Gebruik met batterijen (TA-2 ook met netadapter)
- Aansluiting voor telelus, binaurale/monaurale kabels, hoofdtelefoon
- Directe transmissie naar hoorapparaten via audioschoen
- Combineerbaar met andere accessoires zoals infrarood-, radio- of ringleidinginstallaties

| données techniques / technische gegevens    | PL-51 (A-4506-0)                     | TA-2 (A-4512-0)  |
|---|--------------------------------------|--|
| Dimensions (mm) / Afmetingen (mm):          | H/h: 40 x l/b: 70 x P/d: 105         | h/h: 52 x l/b: 115 x p/d: 157  |
| Couleur / Kleur:                            | argent / zilver                      | blanc/gris clair - wit/lichtgrijs  |
| Poids / Gewicht:                            | 122 g                                | 253 g  |
| Amplification d'écoute / Geheerversterking: | 35 dB                                | 35 dB  |
| Alimentation: / Voeding:                    | 2 piles 1,5 V / 2 x 1,5 V batterijen | 230 V (secteur) / 230 V (netadapter) ou 4 piles 1,5 V / 4 x 1,5 V batterijen |

| Accessoires / Speciale accessoires   |
|--|
| 1 (A-4921-0) <b>Boucle magnétique</b> pour transmission par induction vers des contours d'oreille / <b>Telelus</b> voor inductieve transmissie naar aho-hoortoestellen                               |
| 2 (A-4940-0) <b>Cordon monaural</b> pour connexion à un appareil auditif / <b>Monaurale kabel</b> voor aansluiting op hoortoestellen   |
| 3 (A-4950-0) <b>Cordon binaural</b> pour connexion à un appareil auditif / <b>Binaurale kabel</b> voor aansluiting op hoortoestellen   |
| 4 (A-4903-0) <b>Casque stéthoscopique</b> ergonomique adapté à la forme de l'oreille (s'insère dans le conduit auditif) <b>headset</b> met ergonomische oorpasvorm (past zich aan de gehoorgang aan) |
| 5 (A-4902-0) <b>Casque stéthoscopique léger</b> / <b>vederlichte headset</b>   |
| 6 (A-4905-0) <b>Casque d'écoute classique</b> / <b>klassieke hoofdtelefoon</b>   |
| 7 (A-4904-0) <b>Écouteurs discrets</b> / <b>discrete oortelefoon</b>   |



Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir  
Uw hoorapparatspecialist geeft u uitgebreid en competent advies